



H407



Yes, you can.®

Toilettenklappstuhl

Gebrauchsanweisung

Folding commode chair

Operating instructions

Chaise pliante pour toilettes

Mode d'emploi

Inklapbare toiletstoel

Gebruiksaanwijzing

Sedia comoda pieghevole

Istruzioni per l'uso

Silla WC plegable

Manual de instrucciones

Cadeira articulada de casa de banho

Manual de instruções

Fällbar toalettstol

Bruksanvisning

Taitettava WC-tuoli



Käyttöohje

Toalettklappstol


Bruksanvisning

Toiletklappstol

Betjeningsvejledning

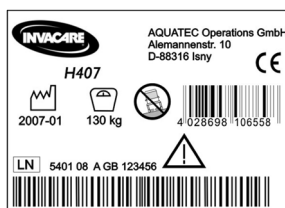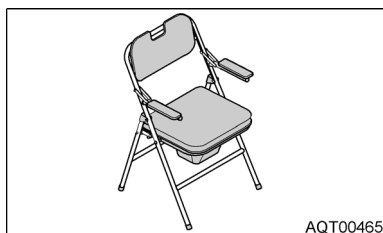

AQT00649

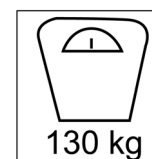

130 kg

Max. Belastung
Max. load
Charge max.
Max. belasting
Portata max.
Carga máx.
Peso máximo
Max. belastning
Maks. kuormitus
Maks. belastning
Maks. belastning


Sicherheitshinweise
Safety instructions
Consignes de sécurité
Veiligheidsinstructies
Indicazioni di sicurezza
Indicaciones de seguridad
Instruções de segurança
Säkerhetsanvisningar
Turvaohjeet
Sikkerhetshenvisninger
Sikkerhedshenvisninger



Bei Defekt nicht verwenden
Do not use if defective
Ne pas utiliser en cas de défaut
Indien defect niet gebruiken
Non impiegarlo se difettoso
No utilizar en malas condiciones
Não utilizar se estiver danificado
Använd inte produkten om den är trasig
Älä käyttää viallista tuotetta
Må ikke brukes når den er defekt
Må ikke anvendes, hvis den er defekt



Nicht zum Duschen und nur bei Zimmertemperatur verwenden
Vor Wärmestrahlung schützen
Not to be used in the shower and only use at room temperature
Protect against exposure to heat
Ne pas utiliser pour la douche. Utiliser uniquement à température ambiante
Protéger du rayonnement thermique
Niet voor het douchen en alleen bij kamertemperatuur gebruiken
Tegen warmtestraling beschermen
Non utilizzare per la doccia e solo a temperatura ambiente
Proteggere da radiazioni termiche
Usar sólo a temperatura ambiente y no utilizar para ducharse
Proteger de la radiación térmica
Não utilizar para tomar banho e usar apenas à temperatura ambiente
Proteger da radiação térmica
Ej för användning i duschen, får endast användas i rumstemperatur
Ska skyddas mot värmestrålning
Ei suihkukäyttöön, ja ainoastaan huoneen lämpötilassa
Suojeltava lämpösäteilyltä
Må ikke brukes til dusjing og kun ved romtemperatur
Beskyttes mot varmestrålning
Må ikke anvendes til brusebad og kun ved stuetemperatur
Skal beskyttes mod varmestrålning

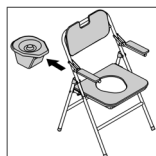

Vor dem Zusammenklappen Topf entnehmen
Remove the pan before you fold up the chair
Retirer la cuvette avant de replier
Voor het inklappen pot verwijderen
Prima di chiudere la sedia rimuovere la cassetta igienica
Antes de plegarla, quite el orinal
Antes de rebater, remover a bacia
Ta ut pottan innan stolen fälls ihop
Potta tulee poistaa ennen kokoonlittamista
Ta av potten før stolen klappes sammen
Tag bækkenet ud før sammenklapningen




Klemmgefahr
Risk of catching
Risque de pincement
Beknenningsgevaar
Pericolo di incastrò
Peligro de pillarse la mano
Perigo de ficar entalado
Risk för klämskador
Rusentumavaara
Klemfare
Fare for at komme i klemme





Nicht als Aufstiegshilfe benutzen
Do not use as a climbing aid
Ne pas utiliser comme aide à la montée
Niet als opstapje gebruiken
Non impiegare come ausilio di salita
No utilizar como elemento auxiliar de ascenso
Não utilizar como ajuda para subir
Får inte användas som upprensings-/överflyttningshjälpmedel
Ei saa käyttää nousuapuvälineenä
Må ikke brukes som påstigningshjelp
Må ikke anvendes til at stille sig op på

Lieferumfang
Scope of delivery
Volume de livraison
Omvang van de levering
Fornitura
Volumen de entrega
Volume de entrega
Leveransomfattning
Toimituskokonaisuus
Leveringsomfang
Indeholdt i leveringen

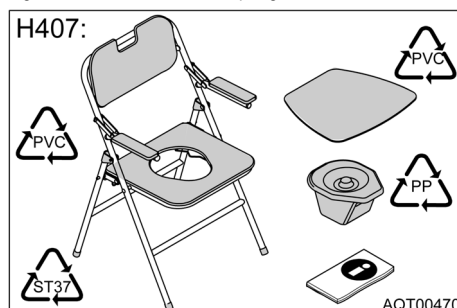

AQT00470


Benutzen
Use
Utilisation
Gebruiken
Utilizzo
Utilizaci3n
Utiliza3o
Anv4ndning
K4ytt3
Bruk
Brug

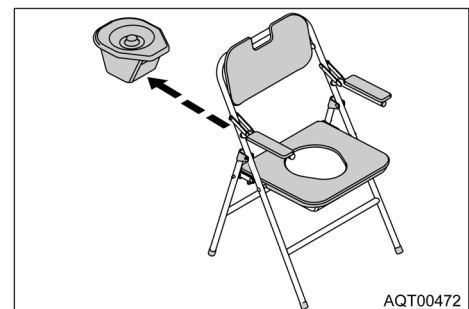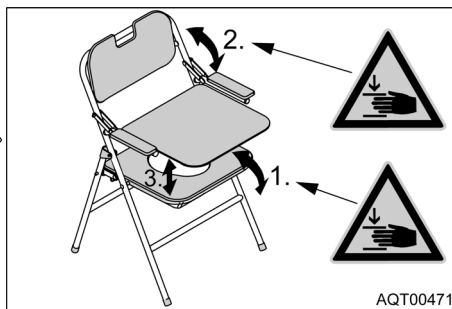

Reinigen
Cleaning
Nettoyage
Reinigen
Pulizia
Limpeza
Limpeza
Reng3ra
Puhdistaminen
Rengj3ring
Rengj3ring



Ohne Scheuermittel reinigen
Clean without scouring agent
Ne pas utiliser de produits r4curents pour le nettoyage
Zonder schuurmiddelen reinigen
Non pulirlo con prodotti abrasivi
No utilizar productos abrasivos para su limpieza
N4o utilize produtos de limpeza abrasivos
Anv4nd inte skurmedel
Puhdistaa ilman hankausaineita
Bruk ikke skuremiddel ved rengj3ring
Rengj3r uden skuremiddel

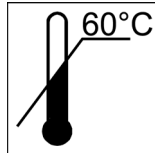

Reinigungstemperatur max. 60 °C
Max. cleaning temperature: 60 °C
Temp4rature de nettoyage 60 °C max.
Reinigingstemperatuur max. 60 °C
Temperatura max. durante la pulizia 60 °C
Temperatura m4x. de limpeza 60 °C
Temperatura m4xima de limpeza 60 °C
Rengj3ringstemperatur max 60 °C
Puhdistusl4mp3tila maks. 60 °C
Temperatur ved rengj3ring maks. 60 °C
Rengj3ringstemperatur maks. 60 °C



Von Hand mit handels4blichen Haushaltsreinigern reinigen
Clean by hand with normal household detergents
Nettoyer 4 la main avec des produits de nettoyage m4nagers en vente dans le commerce
Handmatig met gangbare schoonmaakmiddelen reinigen
Pulire a mano con detergenti per uso domestico comunemente in commercio
Limpiar a mano con productos de limpieza del hogar habituales
Limpar manualmente com detergentes dom4sticos comerciais
Rengj3rs f3r hand med vanliga hush4llsrengj3ringsmedel
Puhdistus k4sin tavallisia pesuaineita
Rengj3r f3r h4nd med vanlige rengj3ringsmidler
Skal rengj3res manuelt med g4engse husholdningsrengj3ringsmidler

Warten, Wiedereinsatz
Maintenance
Maintenance
Onderhouden
Manutenzione
Mantenimiento
Manuten3o
Underh4ll
Huolto
Vedlikehold
Vedlikeholdelse

Bei Einhaltung der oben aufgef4hrten Reinigungs- und Sicherheitshinweise ist das Produkt wartungsfrei. Das Produkt ist f3r den Wiedereinsatz bestimmt. Die Anzahl der maximalen Wiedereins4tze ist abh4ngig vom jeweiligen Produktzustand. Vor dem Wiedereinsatz sind die Reinigungshinweise zu beachten.
The product is maintenance-free, provided the cleaning and safety instructions outlined above are adhered to.
Si vous respectez les consignes de s4curit4 et de nettoyage mentionn4es ci-dessus, le produit ne n4cessitera aucune maintenance.
Bij naleving van de bovengenoemde reinigings- en veiligheidsinstructies is het product onderhoudsvrij.
Se si osservano le indicazioni di pulizia e sicurezza indicate sopra, il prodotto non ha bisogno di alcuna manutenzione.
Si se respetan las indicaciones de limpieza y seguridad anteriores, el producto no necesita mantenimiento.
Se cumprir as indica33es de limpeza e de seguran3a referidas em cima, o produto n4o necessita de manuten33o.
Om ovanst4ende rengj3rings- och s4kerhetsanvisningar beaktas 4r produkten underh4llsfri.
Yll4 mainittuja puhdistus- ja turvallisuusohjeita noudatettaessa ei tuotetta tarvitse huoltaa.
Hvis man overholder r4dene over ang. rengj3ring og sikkerhet, er produktet vedlikeholdsfritt.
Ved overholdelse af rengj3rings- og sikkerhedshenvisningerne, der er anf3rt ovenfor, er produktet vedlikeholdelsesfrit.

Entsorgen
Disposal
Elimination
Afvoeren
Smaltimento
Eliminaci3n
Eliminaci3o
4tervinning
J4tehuolto
Deponering
Bortskaffelse

Die Entsorgung und Verwertung von Altger4ten und Verpackungen muss entsprechend den gesetzlich geltenden Bestimmungen erfolgen.
The disposal and recycling of used devices and packaging must comply with the applicable legal regulations.
L'4limination et le recyclage d'appareils us4s et d'emballages doivent 4tre effectu4s conform4ment aux prescriptions l4gales.
De afvoeren en verwerking van oude toestellen en verpakkingen moet volgens de geldende wettelijke bepalingen gebeuren.
Lo smaltimento e il riciclaggio degli apparecchi vecchi e dell'imballaggio devono essere eseguiti in conformit4 alle disposizioni di legge vigenti.
La eliminaci3n y aprovechamiento de aparatos viejos y embalajes debe realizarse de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
A elimina33o e a reciclagem de aparelhos antigos e embalagens tem de ser realizada de acordo com as determina33es legais em vigor.
Uttj4nta produkter och emballage ska omh4ndertas enligt g4llande lagar och best4mmelser.
Vanhojen laitteiden ja pakkausten j4tehuolto ja uudelleen k4sittely tulee olla lainmukaisten m44r4ysten mukaista.
Deponering og resirkulering av gamle apparater og emballasje m4 skje i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser.
Bortskaffelsen og genanvendelsen af brugte apparater og emballage skal foretages i henhold til de g4ldende bestemmelser i loven.

D

INVACARE® AQUATEC GmbH
Alemannenstra3e 10
D-88316 Isny
Telefon 07562 700-0
Telefax 07562 700-66
E-Mail info@invacare-aquatec.com
Internet www.invacare-aquatec.de

CH

MOBITEC Rehab AG
Benkenstrasse 260
CH-4108 Witterswil
Telefon 061 487 70 80
Telefax 061 487 70 81
E-Mail office@mobitec-rehab.ch
switzerland@invacare.com
www.mobitec-rehab.ch

A

MOBITEC
Mobilit4tshiifen GmbH
Herzog Odilostra3e 101
A-5310 Mondsee
Telefon 06232 5535-0
Telefax 06232 5535-4
E-Mail office@mobitec-austria.com
austria@invacare.com

FIN

INVACARE® AB
Fagerstagatan 9
S-163 91 Sp4nga
Puhelin +46 08 761 70 90
Fax +46 08 761 81 08
E-mail finland@invacare.com

F

INVACARE® Poirier S.A.S.
Route de St Roch
F-37230 Fondettes
T4l4phone 0247 626466
T4l4fax 0247 421224
E-mail contactfr@invacare.com
Internet www.invacare.fr

DK

INVACARE® A/S
Sdr. Ringvej 37
DK-2605 Br4ndby
Telefon 036 90 00 00
Telefax 036 90 00 01
E-mail denmark@invacare.com

P

INVACARE® Lda
Rua Estrada Velha, 949
P-4465-784 Le3a do Balio
Telefone 225 1059 46/47
Telefax 225 1057 39
E-mail portugal@invacare.com

CDN

INVACARE® CANADA INC.
570 Matheson Blvd. E., Unit 8
CDN Mississauga
On. L4Z 4G4
Telephone 0905 8908300
Telefax 0905 8905244
Internet www.invacare.ca

E

INVACARE® S.A.
c/Areny
s/n - Poligon Industrial de Celr4
E-17460 Celr4 (Girona)
T4l4fono 972 493200
Telefax 972 493220
E-mail contactsp@invacare.com
Internet www.invacare.es

N

INVACARE® AS
Grensesvingen 9
Postboks 6230, Etterstad
N-0603 Oslo
Telefon 22 57 95 00
Telefax 22 57 95 01
E-mail norway@invacare.com
Hjemmeside www.invacare.no

S

INVACARE® AB
Fagerstagatan 9
S-163 91 Sp4nga
Telefon 08 761 70 90
Telefax 08 761 81 08
E-Post sweden@invacare.com
Hemsida www.invacare.se

GB

INVACARE® Ltd
South Road
Bridgend Industrial Estate
UK-Bridgend CF31 3PY
Telephone 01656 664321
Telefax 01656 667532
E-mail uk@invacare.com
Internet www.invacare.co.uk

I

INVACARE® Mecc San s.r.l.
Via dei Pini, 62
I-36016 Thiene (VI)
Telefono 0445 380059
Telefax 0445 380034
E-mail italia@invacare.com
Internet www.invacare.it

NL

INVACARE® BV
Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede
Telefoon 0318 695 757
Fax 0318 695 758
E-Mail nederland@invacare.com
csede@invacare.com

AQT-0025-02-XL

© 2009 INVACARE® AQUATEC GmbH D-88316 Isny
Art.-Nr.: 1471135 - Stand 08/09